

# MATELAS ANTI-ESCARRES ADL®

Arsos® Soft

Stade 4 (EPUAP) ref. 111 540

Matelas anti-escarres AIR et MOUSSE, pour la PREVENTION des patients à faible et haut risque d'escarres et le traitement des ESCARRES de STADE 4 (EPUAP). Patients de 20 à 100 kg. Système remplaçant le matelas.



## NOUVEAU CONCEPT HYBRIDE CELLULE AIR & MOUSSE



### Matelas à air, avec MOUSSE INTEGREE : POMPE DIGITALE Dexos® light

#### - 28 cellules AMOVIBLES INDIVIDUELLEMENT

- noyau de chaque cellule en mousse polyuréthane cerclé d'air. Zones périphériques RENFORCEES

- Nouveau système CPR (Réa Cardio Pulmonaire) évite les ouvertures accidentelles.

- **HOUSSE** polyuréthane de haute qualité, **PERMEABLE à l'AIR**, imperméable aux liquides.

**Lavable à 95°C et sèche linge à 50°C maximum.**

- **alarme visuelle** ou visuelle et sonore

- Mode en pression **statique** ou **alternée**

- Pression alternée par module de 3 cellules, avec des cycles de 5 à 20 min. au choix

- **PRESSION REGLABLE** au confort du patient

- **pompe SILENCIEUSE**. système anti-vibrations (AVS),

- utilisation très simple


- **verrouillable**

# MATELAS ANTI-ESCARRES ADL®

Arsos® Soft

Stade 4 (EPUAP) ref. 111 540

## CONCEPT HYBRIDE CELLULE AIR & MOUSSE création ADL®

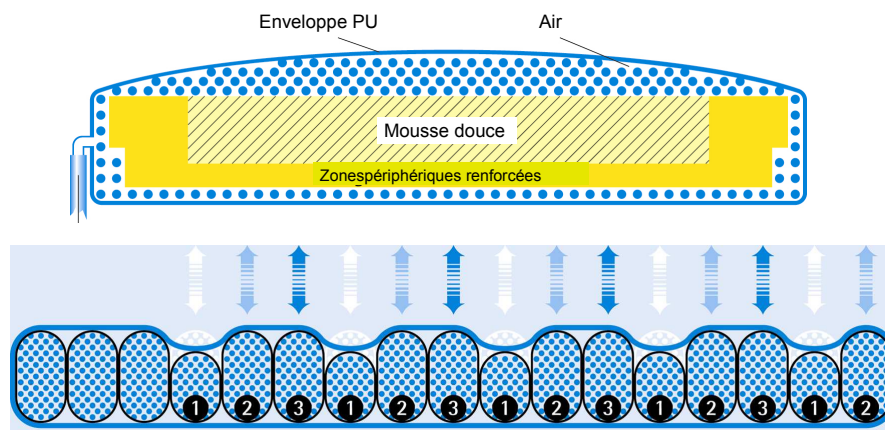

Pression alternée par module de 3 cellules

### AVANTAGES :

FIABILITE

QUALITE DE FABRICATION

CONFORT du patient (système air et mousse)

MAINTENANCE facilitée (cellules interchangeables très facilement)

POMPES SILENCIEUSES, REGLABLES aisément selon les patients

ARSOS® SOFT	Matelas	Housse	Pompe DEXOS® LIGHT wds
Matière	Polyuréthane	PU - perméable à l'air et imperméable aux liquides. Lavable à 95°C et sèche-linge à 50°C maxi	PVC
Dimensions en cm	198 x 90 x 11.5 (gonflé)	-	23x15x8.5
Poids en kg	5.9 kg	0,9 kg	1,5 kg
Garantie	2 ans	-	2 ans
Puissance électrique	-	-	230 V / 8 W / 50Hz
Fusible	-	-	500 mA / lent
Nettoyage	Désinfection par auto-clave	Lavable à 95°C / sèche linge à 50°C maxi.	Désinfection avec un chiffon
Indications	<b>Prévention des patients à risque et traitement des escarres Stade 1 à 4 (EPUAP)</b>		

